


**Passy Muir™ τραχειοστομία και
βαλβίδες κατάποσης και ομιλίας αναπνευστήρα**



Passy Muir™

Passy-Muir, Inc.
17992 Mitchell South, Suite 200, Irvine, CA 92614-6813 USA
Τηλέφωνο: 949.833.8255 • Fax: 949.833.8299
Ιστότοπος: www.passymuir.com • E-mail: info@passymuir.com

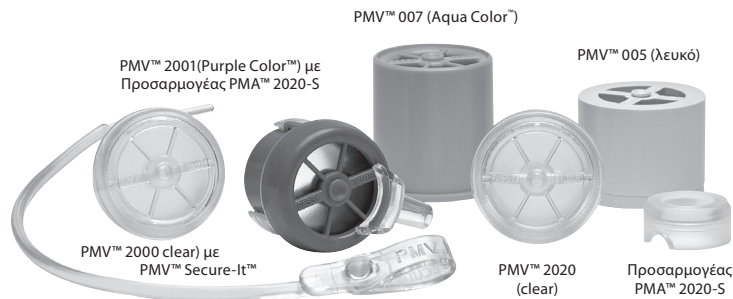

EMERGO ΕΥΡΩΠΗ
Γουετερβοορσεντικ [Westervoortsedijk] 60
6827 AT Arnhem [Arnhem]
Ολλανδία

CE 0050

© Passy-Muir, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

IBO2/IGR/R0925

Passy Muir™



**Προσαρμογέας Οξυγόνου PMA™ 2000
πάνω στη βαλβίδα PMV™ 2001 (Purple Color™)**

**Passy-Muir™ Valve Oxygen Adapter (PMA™ 2000)
Instructions For Use**

For use with PMV™ 2000 (clear) and PMV™ 2001 (Purple Color™)
Low Profile Tracheostomy & Ventilator
Swallowing and Speaking Valves

**Προσαρμογέας Οξυγόνου Βαλβίδας Passy-Muir™ (PMA™ 2000)
Οδηγίες Χρήσης**

Για χρήση με τις βαλβίδες κατάποσης και ομιλίας
Χαμηλού Προφίλ για Τραχειοστομία και Αναπνευστήρα
PMV™ 2000 (clear) και PMV™ 2001 (Purple Color™)



SYMBOLS / ΣΥΜΒΟΛΑ



Manufacturer; Κατασκευαστής



Authorized representative in the European Union;
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Use-by date; Χρήση έως



Batch code; Κωδικός παρτίδας



Product reference number; Αριθμός αναφοράς προϊόντος



Non-sterile; Μη αποστειρωμένο



Instructions for use; Οδηγίες χρήσης



Caution; Προσοχή



Single patient multiple use; Πολλαπλής χρήσεως μοναδικού ασθενούς



Medical device; Ιατρική συσκευή



Unique device identifier; Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης συσκευής

R_xonly Prescription only; Αποκλειστικά συνταγογραφούμενο

Passy-Muir™ Valve Oxygen Adapter (PMA™ 2000 Adapter)

CONTENTS:

One (1) PMA™ 2000 Adapter and PMA 2000 Adapter Instructions. Contents of this package are latex free and nonsterile. **REF** PMA 2000.

Read all Warnings, Precautions and Instructions Carefully Prior to Use.

- ⚠ **CAUTION:** Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- ⚠ **CAUTION:** For use with the PMV™ 2000 (clear) and PMV™ 2001 (Purple Color™) Speaking Valves only.
- ⚠ **WARNING: SINGLE PATIENT USE ONLY. THIS DEVICE IS NOT DESIGNED, SOLD, OR INTENDED FOR USES EXCEPT AS INDICATED.**
- ⚠ **WARNING: PATIENTS USING THE PMA™ 2000 ADAPTER MUST BE OBSERVED AND/OR MONITORED PER PHYSICIAN DIRECTION.**
- ⚠ **WARNING: DO NOT USE THE DEVICE IF DAMAGED OR ALTERED AS THIS MAY LEAD TO AIRWAY OBSTRUCTION**
- ⚠ **WARNING: NOT INTENDED FOR USE IN-LINE DURING MECHANICAL VENTILATION.**

INTENDED USE:

Passy-Muir Valve Oxygen Adapter (PMA 2000) is designed for use with the companion PMV 2000 (clear) and PMV 2001 (Purple Color) Low Profile Tracheostomy & Ventilator Swallowing and Speaking Valves. The PMA 2000 allows for improved mobility of those patients requiring a tracheostomy tube, speaking valve, and low flow supplemental oxygen. The PMA 2000 is intended for use by both short-term and long-term adult, pediatric, and neonatal tracheostomized patients using the PMV 2000 or PMV 2001. The intended users are healthcare professionals trained in the care of patients with a tracheostomy, including physicians, nurses, speech-language pathologists, physiotherapists, and respiratory therapists, as well as patients and caregivers under the supervision of a healthcare professional.

DESCRIPTION:

The PMA 2000 Adapter is small, lightweight, clear in color and readily snaps onto the PMV 2000 (clear) and PMV 2001 (Purple Color) Low Profile Tracheostomy & Ventilator Swallowing and Speaking Valves. The PMA 2000 Adapter is easily removed when not in use. The PMA 2000 Adapter allows for improved mobility and comfort of those patients requiring a tracheostomy tube, speaking valve and low flow, supplemental oxygen and humidity.

BENEFITS:

- Delivery of oxygen up to 6L/min.
- Oxygen is delivered in front of the diaphragm of the Passy-Muir™ Valve. This avoids complications that may be associated with providing continuous flow behind the diaphragm of a speaking valve, which may include air trapping, drying of secretions and possible cilia damage.
- Allows for improved mobility of patients requiring low flow, supplemental oxygen and humidity.
- Small, lightweight design.
- Simple snap-on attachment that is easily removed when not in use.

INDICATIONS:

- Designed for use with the companion Passy-Muir Low Profile PMV 2000 (clear) and PMV 2001 (Purple Color) Tracheostomy & Ventilator Swallowing and Speaking Valves. It is not indicated for any other use or with any other speaking valve.
- Tracheostomized patients utilizing the PMV™ 2000 (clear) and PMV™ 2001 (Purple Color™) Swallowing and Speaking Valves and requiring portable, low flow, supplemental oxygen ($\leq 6L/min$).
- Mechanically ventilated patients during periods of time they are off the ventilator and requiring portable, low flow, supplemental oxygen ($\leq 6L/min$).


CONTRAINDICATIONS:

- Patients requiring oxygen flows $> 6L/min$.
- Patients requiring high humidity levels are not candidates for use of the PMA™ 2000 Adapter, as use of this device limits the amount of humidity that can be delivered through the O₂ port. A decreased amount of humidity in the airway may affect the viscosity of secretions.
- Oxygen conservation devices that require flow triggering cannot be used with the PMA 2000 Adapter, as it may not allow the patient to properly trigger the gas source, thereby decreasing the amount of oxygen delivered to the patient.
- Do not use in-line during mechanical ventilation.
- Do not use with devices other than the PMV 2000 (clear) and PMV 2001 (Purple Color) Tracheostomy & Ventilator Swallowing and Speaking Valves.

PLACEMENT:

The following instructions are for the PMA 2000 Adapter only. Refer to assessment instructions for the PMV 2000 (clear) and PMV 2001 (Purple Color) Valves, in the Passy-Muir™ Valve Instruction Booklet.

- Prior to placing the Passy-Muir Valve on the tracheostomy tube, place the oxygen tubing firmly onto the side port connector (Fig. 1A) that protrudes from the side of the PMA 2000 Adapter to ensure a secure attachment.

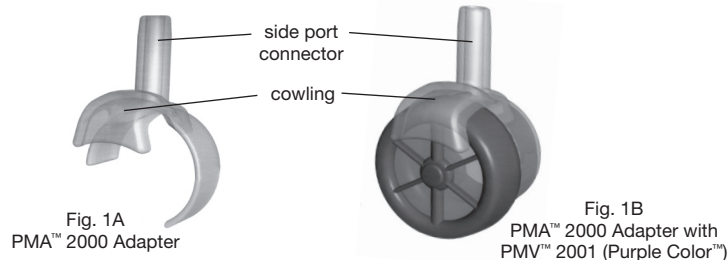

- Snap the PMA™ 2000 Adapter gently into place on the side of either the PMV™ 2000 (clear) or PMV™ 2001 (Purple Color™) Low Profile Tracheostomy & Ventilator Swallowing and Speaking Valve. The curvatures of the two parts should fit tightly to one another, with no gaps or interference from the small Secure-It™ ring that is molded into the side of the Passy-Muir™ Valve. When properly attached, the cowling (see Fig.1B) of the PMA 2000 Adapter should overhang the front edge of the Passy-Muir Valve in order to deliver oxygen directly in front of the diaphragm of the valve.
- After the PMA 2000 Adapter (with oxygen tubing attached) has been snapped onto the Passy-Muir Valve, the Passy-Muir Valve can then be placed on the hub of the tracheostomy tube in the conventional manner (see Passy-Muir Valve Instruction Booklet).

⚠ WARNING: AS COMPARED TO DELIVERY OF OXYGEN VIA A TRACH COLLAR, THE PMA™ 2000 ADAPTER IS AN OPEN OXYGEN DELIVERY SYSTEM. THEREFORE, DELIVERY OF F₂ VIA THE PMA 2000 ADAPTER MAY BE DIFFERENT THAN WITH THE USE OF A TRACH COLLAR. THE CLINICIAN SHOULD USE METHODS SUCH AS PULSE OXIMETRY TO ENSURE PROPER TITRATION OF O₂ WHILE USING THE PMA 2000 ADAPTER.

REMOVAL:

- Remove the Passy-Muir Valve from the hub of the tracheostomy tube (as per Passy-Muir Valve Instruction Booklet).
- Remove the PMA 2000 Adapter from the Passy-Muir Valve with a gentle pulling motion.
- Remove the oxygen tubing from the PMA 2000 Adapter.

CARE AND CLEANING:

⚠ CAUTION: Improper cleaning may damage the device and result in malfunction or airway obstruction. Clean device in accordance with cleaning procedure identified in this booklet.

- The PMA 2000 Adapter should be cleaned daily to prevent debris from accumulating within the oxygen port and chamber. Before cleaning, remove the adapter from the Passy-Muir Valve and remove the oxygen tubing from the PMA 2000 Adapter. Wash the PMA 2000 Adapter and Passy-Muir Valve as separate units (see separate cleaning instructions for the Passy-Muir Valve, provided in the Passy-Muir Valve Instruction Booklet).
- Swish the PMA 2000 Adapter in soapy, warm water (not hot water).
- Rinse the PMA 2000 Adapter thoroughly with warm water.
- Allow the PMA 2000 Adapter to air dry thoroughly before placing it in the storage container that is packaged with the Passy-Muir Valve.
- Do not apply heat to dry the PMA 2000 Adapter. Do not use hot water, peroxide, bleach, vinegar, or alcohol to clean the PMA 2000 Adapter. Do not autoclave.

LIFETIME:

- The lifetime of the PMA 2000 is two months when cleaned and used properly. The PMA 2000 should be replaced every two months or sooner if it becomes dirty, contaminated, or shows any signs of damage.

DISPOSAL:

- Discard the PMA 2000 as medical waste per applicable national regulations and facility policy.

Medical Device Regulation Notice: Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Προσαρμογέας Οξυγόνου Βαλβίδας Passy-Muir™ (PMA™ 2000 Adapter)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Ένας (1) Προσαρμογέας PMA™ 2000 και Οδηγίες για τον προσαρμογέα PMA 2000. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας αυτής δεν περιέχουν λάτεξ και δεν είναι αποστειρωμένα. **REF** PMA 2000.

Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ επιβάλλει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο από γιατρούς ή με εντολή γιατρού.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για χρήση μόνο με τις Βαλβίδες Ομιλίας PMV™ 2000 (clear) και PMV™ 2001 (Purple Color™).
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ, ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ PMA™ 2000 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΦΡΑΓΜΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ.

ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο Προσαρμογέας Βαλβίδας Οξυγόνου (PMA 2000) είναι σχεδιασμένος για χρήση με τις συνοδευτικές PMV 2000 (διαφανές) και PMV 2001 (Μωβ χρώματος) Βαλβίδες Ομιλίας Χαμηλού Προφίλ Τραχειοστομίας & Αναπνευστήρα. Το PMA 2000 επιτρέπει βελτιωμένη κινητικότητα αυτών των ασθενών οι οποίοι χρειάζονται σωλήνα τραχειοστομίας, βαλβίδα ομιλίας και συμπληρωματικό οξυγόνο χαμηλής ροής. Το PMA 2000 προορίζεται για χρήση και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα από ενήλικους, παιδιατρικούς και νεογνικούς τραχειοστομικούς ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιούν το PMV 2000 ή το PMV 2001. Η σκοπούμενη χρήστες είναι επαγγελματίες του τομέα ιατρικής οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην φροντίδα ασθενών με τραχειοστομία, συμπεριλαμβανομένου ιατρών, νοσηλευτών, παθολόγων του τομέα ομιλίας και γλώσσας, φυσιοθεραπευτές, και θεραπευτές αναπνοής, καθώς και από ασθενείς και φροντιστές υπό την επίβλεψη επαγγελματιών του τομέα της ιατρικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο Προσαρμογέας PMA 2000 είναι μικρός, ελαφρύς, ανοικτόχρωμος και κουμπώνει εύκολα στις βαλβίδες κατάποσης και ομιλίας χαμηλού προφίλ για τραχειοστομία και αναπνευστήρα PMV 2000 (clear) και PMV 2001 (Purple Color). Ο Προσαρμογέας PMA 2000 αφαιρείται εύκολα όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο Προσαρμογέας PMA 2000 επιτρέπει βελτιωμένη κινητικότητα και άνεση στους ασθενείς που χρειάζονται τραχειοσωλήνα, βαλβίδα ομιλίας και συμπληρωματικό οξυγόνο και υγρασία με χαμηλή ροή.

ΩΦΕΛΗ:

- Παροχή οξυγόνου μέχρι 6 λίτρα/λεπτό.
- Το οξυγόνο παρέχεται στο εμπρός μέρος του διαφράγματος της βαλβίδας Passy-Muir™. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται επιπλοκές που μπορεί να σχετίζονται με την παροχή συνεχούς ροής πίσω από το διάφραγμα μιας βαλβίδας ομιλίας, πράγμα που μπορεί να περιλαμβάνει παγίδευση αέρος, ξήρανση εκκρίσεων και πιθανή βλάβη στα τριχίδια.
- Επιτρέπει βελτιωμένη κινητικότητα στους ασθενείς που χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και υγρασία με χαμηλή ροή.
- Σχεδιασμένο μικρό, ελαφρύ.
- Απλό εξάρτημα κουμπώματος, που αφαιρείται εύκολα όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Σχεδιασμένο για χρήση με τις βαλβίδες κατάποσης και ομιλίας χαμηλού προφίλ για τραχειοστομία και αναπνευστήρα Passy-Muir PMV 2000 (clear) και PMV 2001 (Purple Color). Δεν προορίζεται για καμία άλλη χρήση ούτε για καμία άλλη βαλβίδα ομιλίας.
- Ασθενείς με τραχειοστομία που χρησιμοποιούν τις βαλβίδες κατάποσης και ομιλίας PMV™ 2000 (clear) και PMV™ 2001 (Purple Color™) και χρειάζονται φορητό συμπληρωματικό οξυγόνο χαμηλής ροής (<6 λίτρα/λεπτό).
- Ασθενείς με μηχανικό αερισμό κατά τα χρονικά διαστήματα που βρίσκονται εκτός αναπνευστήρα και χρειάζονται φορητό συμπληρωματικό οξυγόνο χαμηλής ροής (<6 λίτρα/λεπτό).


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Ασθενείς που χρειάζονται ροές οξυγόνου > 6 λίτρα/λεπτό.
- Ασθενείς που χρειάζονται υψηλά επίπεδα υγρασίας δεν συνιστάται να χρησιμοποιούν τον Προσαρμογέα PMA™ 2000 Adapter, καθώς η χρήση της συσκευής αυτής περιορίζει την ποσότητα υγρασίας που μπορεί να παρασχεθεί από τη θύρα εισόδου O2. Μειωμένη ποσότητα υγρασίας στην αναπνευστική οδό μπορεί να επηρεάσει το ιξώδες των εκκρίσεων.
- Συσκευές διατήρησης οξυγόνου που χρειάζονται εκκίνηση με τη ροή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον Προσαρμογέα PMA 2000, καθώς αυτός μπορεί να μην επιτρέψει στον ασθενή να εκκινήσει κανονικά την πηγή αερίου, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας οξυγόνου που παρέχεται στον ασθενή.
- Μην το χρησιμοποιείτε εν σειρά κατά τον μηχανικό αερισμό.
- Μην το χρησιμοποιείτε με συσκευές άλλες εκτός από τις βαλβίδες κατάποσης και ομιλίας για τραχειοστομία και αναπνευστήρα PMV 2000 (clear) και PMV 2001 (Purple Color).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Οι παρακάτω οδηγίες είναι μόνο για τον Προσαρμογέα PMA 2000. Ανατρέξτε στις οδηγίες αξιολόγησης για τις βαλβίδες PMV 2000 (clear) και PMV 2001 (Purple Color), στο βιβλιário οδηγιών της Passy-Muir™.

- Πριν από την τοποθέτηση της βαλβίδας Passy-Muir στον τραχειοσωλήνα, στερεώστε καλά τον σωλήνα οξυγόνου στον σύνδεσμο της πλαινής θύρας (Εικόνα 1Α) που προεξέχει στο πλάι του Προσαρμογέα PMA 2000 για να εξασφαλίσετε μια σταθερή σύνδεση.

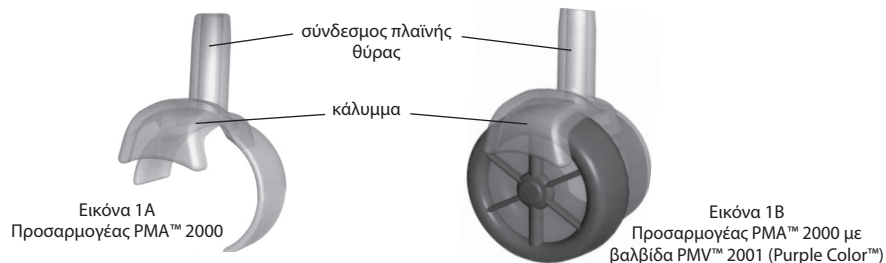

- Κουμπώστε προσεκτικά τον Προσαρμογέα PMA™ 2000 στη θέση του στο πλάι της βαλβίδας κατάποσης και ομιλίας χαμηλού προφίλ για τραχειοστομία και αναπνευστήρα PMV™ 2000 (clear) ή της PMV™ 2001 (Purple Color™). Οι καμπυλότητες των δύο μερών θα πρέπει να ταιριάζουν καλά μεταξύ τους, χωρίς κενά ή παρεμβολές από τον μικρό δακτύλιο Secure-It™ που είναι διαμορφωμένος στο πλάι της βαλβίδας Passy-Muir™. Όταν τοποθετηθεί σωστά, το κάλυμμα (βλ. Εικόνα 1Β) του Προσαρμογέα PMA 2000 θα πρέπει να προεξέχει πάνω από το εμπρός άκρο της βαλβίδας Passy-Muir ώστε να παρέχει το οξυγόνο απευθείας εμπρός από το διάφραγμα της βαλβίδας.
- Αφού κουμπώσει ο Προσαρμογέας PMA 2000 (με τον σωλήνα του οξυγόνου συνδεδεμένο) πάνω στη βαλβίδα Passy-Muir, η βαλβίδα Passy-Muir μπορεί να συνδεθεί στο ρακόρ του τραχειοσωλήνα με τον συμβατικό τρόπο (βλέπε βιβλιário οδηγιών βαλβίδας Passy-Muir)..

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ, Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ PMA™ 2000 ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΑΡΟΧΗ FIO2 ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ PMA 2000 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠ' ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΑΡΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ. Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΟΠΩΣ Η ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΠΑΛΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ O2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ PMA 2000.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

- Αφαιρέστε τη βαλβίδα Passy-Muir από το ρακόρ του τραχειοσωλήνα (όπως περιγράφεται στο βιβλιário οδηγιών της βαλβίδας Passy-Muir).
- Αφαιρέστε τον Προσαρμογέα PMA 2000 από τη βαλβίδα Passy-Muir με μια ελαφρά κίνηση έλξης.
- Αφαιρέστε τον σωλήνα οξυγόνου από τον Προσαρμογέα PMA 2000.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λανθασμένος καθαρισμός ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή και να οδηγήσει σε βλάβη ή σε φραγμό του αεραγωγού. Καθαρίστε την συσκευή σύμφωνα με την διαδικασία καθαρισμού η οποία παρουσιάζεται στο παρόν βιβλιário.

- Ο Προσαρμογέας PMA 2000 θα πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σωματιδίων μέσα στην είσοδο και στον θάλαμο οξυγόνου. Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε τον προσαρμογέα από τη βαλβίδα Passy-Muir και αφαιρέστε τον σωλήνα οξυγόνου από τον Προσαρμογέα PMA 2000. Πλύντε τον Προσαρμογέα PMA 2000 και τη βαλβίδα Passy-Muir χωριστά (βλέπε ξεχωριστές οδηγίες για το πλύσιμο της βαλβίδας Passy-Muir στο βιβλιário οδηγιών της βαλβίδας Passy-Muir).
- Ανακινήστε ζωηρά τον Προσαρμογέα PMA 2000 σε χλιαρή σαπουνάδα (όχι σε ζεστό νερό).
- Ξεπλύντε τον Προσαρμογέα PMA 2000 καλά με χλιαρό νερό.
- Αφήστε τον Προσαρμογέα PMA 2000 να στεγνώσει καλά στον αέρα πριν τον τοποθετήσετε στη θήκη που παρέχεται με τη βαλβίδα Passy-Muir.
- Μην χρησιμοποιήσετε θέρμανση για το στέγνωμα του Προσαρμογέα PMA 2000. Μην χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό, οξυζενέ, χλωρίνη, ξύδι ή ιονόπνευμα για τον καθαρισμό του Προσαρμογέα PMA 2000. Μην χρησιμοποιείτε κλίβανο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:

Η διάρκεια ζωής του PMA 2000 είναι δύο μήνες όταν καθαρίζεται και χρησιμοποιείται ορθά. Το PMA 2000 θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε δύο μήνες ή νωρίτερα στην περίπτωση όπου λερώνεται, μολύνεται ή επιδεικνύει οιαδήποτε σημάδια ζημιάς.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Απορρίψτε το PMA 2000 ως ιατρικό απόβλητο σύμφωνα με τους εφαρμοσίμους εθνικούς κανονισμούς και την πολιτική της μονάδας.

Ειδοποίηση Κανονισμού Ιατρικής Συσκευής: Οιοδήποτε σοβαρό περιστατικό το οποίο έχει λάβει μέρος εν σχέσει με την συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο ο χρήστης ή και ο ασθενής είναι εγκατεστημένοι.